

PURE

SMILE AND WHITENESS



BLANQUEA

LOS DIENTES

en solo **25 minutos**
al día



axis-dental.com/es

PURE

SMILE AND WHITENESS

PURE Pen Kit dispone de un pincel con un gel del 16% de peróxido de carbamida que se activa gracias a una luz para potenciar el cambio de color de sus dientes.*



¿Cómo funciona el tratamiento de blanqueamiento dental PURE Pen?

Un tratamiento simple y sencillo.

1. Gire la parte trasera del pincel para permitir al gel salir sobre la punta.
2. Pinte sus dientes visibles con el pincel.
3. Posicione la férula entre sus labios y sus dientes, conecte el dispositivo a su móvil y encienda la luz.
4. Después de 25 minutos el dispositivo se apagará automáticamente.

01



02



03

04



SOLO
25 MIN

Resultados visibles tras 15/20 días de aplicaciones . En cualquier momento puede comprar la jeringa suelta del gel activo para actuar sobre el color de sus dientes.




El PURE Pen de **Axis Dental** dispone de una luz con 16 focos y una férula blanda para potenciar la eficacia del tratamiento y mejorar la **comodidad del paciente**.



Férula blanda, adaptada y cómoda que asegura la fijación del gel

16 focos de luces LED para un tratamiento eficaz.

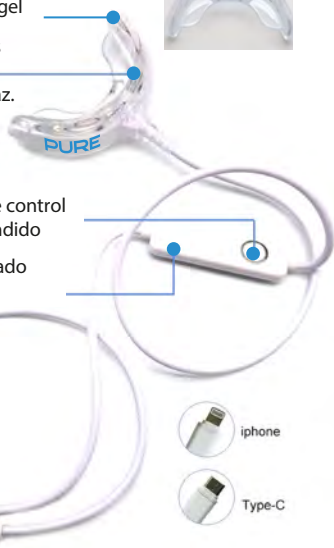

Botón de control de encendido

Temporizador integrado para total seguridad



Conexión mediante cable USB



**por favor consulte las instrucciones disponibles en el kit.*

Consulte a su **dentista** sobre las diferentes opciones de tratamiento **PURE**.



EN *Casa*



EN EL *Dentista*

**DOS MÉTODOS
PARA COMODIDAD
DEL PACIENTE.**

AXIS
dental
SWISS QUALITY

www.axis-dental.com

AXIS
dental
SWISS QUALITY



axis-dental.com/es

